

## СИСТЕМА ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ПРОКСИМАЛЬНОГО АНАСТОМОЗА HEARTSTRING

CARDIOVASCULAR



**С 1838 года компания MAQUET известна в мире медицины, как поставщик высококлассного оборудования**

для оснащения операционных залов и отделений интенсивной терапии. Независимо от функционального назначения производимого оборудования, конструктивные решения медицинской техники с брендом MAQUET разрабатываются с учетом потребностей медицинского персонала и пациентов, отличаются высоким качеством, уникальным дизайном, удобной эргономикой.

Система наложения проксимального анастомоза **HEARTSTRING** позволяет обеспечить гемостаз при операции коронарного шунтирования на работающем сердце без использования зажима, что существенно снижает риск эмболических осложнений.


MAQUET – The Gold Standard.

ООО «МАКЕ»  
Россия, 109004, Москва,  
ул. Станиславского,  
д. 21, стр. 7  
Тел.: (495) 514-0055  
Факс.: (495) 514-0056  
Сервисный центр  
Тел.: 8-800-333-6253  
info@maquet.ru  
www.maquet.ru

# HEARTSTRING – КОМФОРТ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ MAQUET – THE GOLD STANDARD

## Клинические преимущества:

- Выполнение коронарного шунтирования без наложения боковых зажимов снижает общую эмболическую нагрузку, особенно при выраженном атеросклерозе аорты.
- Снижение количества интраоперационных эмболий уменьшает вероятность послеоперационного нейropsychологического дефицита.

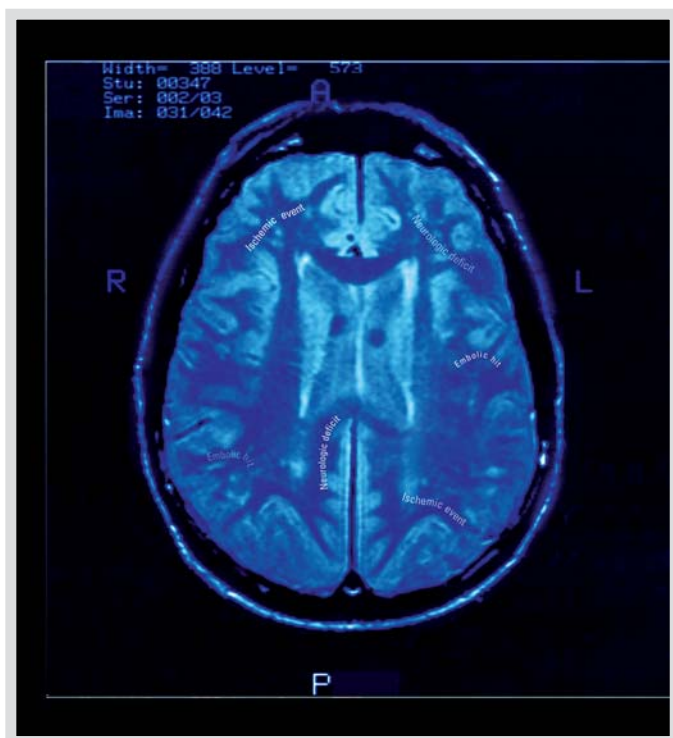

## Информация для заказчика:

HEARTSTRING	
HSK-2043	Набор для наложения проксимального анастомоза в составе: - Устройство для наложения анастомоза HeartString - Перфоратор аорты 4.3 мм
HSK-2038	Набор для наложения проксимального анастомоза в составе: - Устройство для наложения анастомоза HeartString - Перфоратор аорты 3.8 мм
HS-1045	Устройство для наложения проксимального анастомоза HeartString

1. Аортальный перфоратор одним движением создает круглое ровное отверстие.



2. HEARTSTRING вводится в отверстие анастомоза при помощи низкопрофильного доставляющего устройства.



3. Эластичный HEARTSTRING обеспечивает гемостаз во время работы с анастомозом без наложения зажима.



4. Легко потянув нить, вы разматываете HEARTSTRING, вытягивая его сквозь наложенный шов, ничего не оставляя в просвете аорты.