


МОБИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ BETASTAR

MAQUET
GETINGE GROUP

SURGICAL WORKPLACES

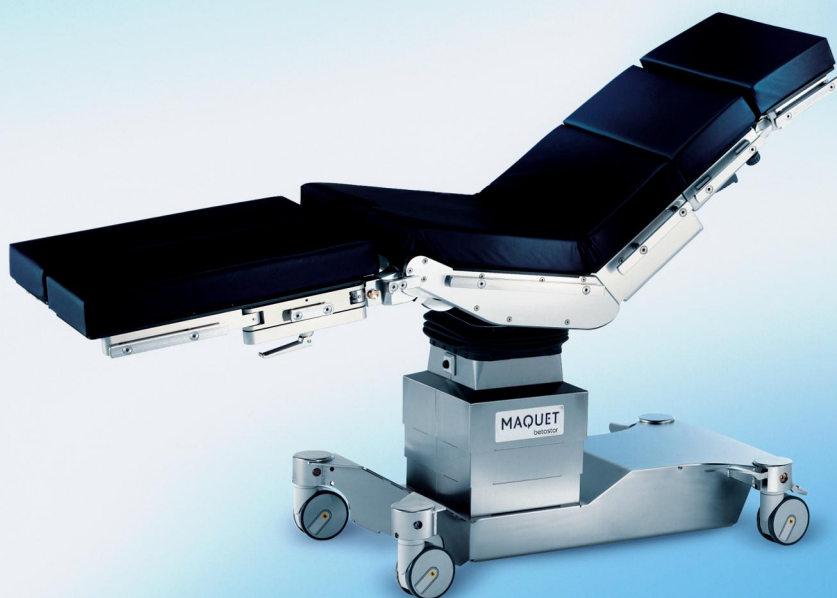

Верность традициям: более 165 лет компания MAQUET известна в мире медицины как поставщик высококлассного оборудования для оснащения операционных залов. Широкий модельный ряд оборудования включает как мобильные операционные столы, так и многофункциональные системы со сменными столешницами. Конструктивные решения разработаны с учетом требований заказчиков, отличаются высоким качеством, уникальным дизайном, удобной эргономикой. Операционные столы MAQUET – определяют международный стандарт в данном виде оборудования.

BETASTAR – новый мобильный универсальный операционный стол класса «комфорт» имеет модульную конструкцию. Благодаря возможности комплектации стола различными дополнительными секциями, аксессуарами и специальной приставкой в зависимости от типа оперативного вмешательства, BETASTAR успешно используется при проведении операций в гинекологии и урологии, травматологии и ортопедии, сосудистой и общей хирургии.

MAQUET – The Gold Standard.

ООО «МАКЕ»
Россия, 109004 Москва,
ул. Станиславского,
д. 21, стр. 3
Тел.: (495) 514 0055
Факс: (495) 514 0056
Сервисный центр
Тел.: 8-800 333 6253
moscow@maquet.ru
www.maquet.ru

MEMBER OF THE GETINGE GROUP

КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ В ИДЕАЛЬНОЙ ГАРМОНИИ MAQUET – THE GOLD STANDARD

Регулировки стола: управление функциями операционного стола осуществляется различными способами – проводным пультом, инфракрасным ручным пультом, ножной педалью, с помощью резервной панели управления. Возможно одновременное подключение проводного пульта и ножной педали.

Соединительные элементы: все соединительные элементы стола надежно защищены для избежания защемления и травмирования врачей и пациентов. Это обеспечивает дополнительный комфорт при позиционировании стола и безопасность при использовании электрохирургических аппаратов во время операции.

Удобство фиксации секций столешницы: наличие системы Easy Click позволяет быстро присоединять секции столешницы без использования инструментов, а также избавляет от необходимости затягивать фиксаторы после установки. Предусмотрена возможность работы стола в реверсивном режиме, при этом ножная и спинная секции легко меняются местами, что обеспечивает дополнительное удобство хирургам в малоинвазивной, сердечно-сосудистой хирургии и при работе с рентгеновскими аппаратами.

Специальное покрытие: матрас столешницы выполнен из прочного многослойного SFC-материала и имеет толщину 80 мм, что обеспечивает комфортное размещение и надежную фиксацию пациента на операционном столе.

Многослойный матрас толщиной 80 мм позволяет пациентам чувствовать себя комфортно при подготовке и во время операции и помогает предотвратить образование пролежней у пациентов



Многообразие элементов управления функциями стола



BETASTAR: пример комплектации стола для проведения операций на почке (реверсивная ориентация пациента)

Технические характеристики:

Высота подъема столешницы	600-950 мм
Положение тренделенбург/антитренделенбург	30°
Латеральный наклон	20°
Наклон нижней спинной секции	+70°/-40°
Наклон ножной секции	+80°/-90°
Максимальная нагрузка на стол	454 кг
Ширина столешницы без учета боковых рельс	540 мм