

**ГЕМОКОНЦЕНТРАТОРЫ
НОВЫЙ ДИЗАЙН
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**

CARDIOVASCULAR



Беспромывочная технология и высокий коэффициент ультрафильтрации.

При использовании гемоконцентраторов контроль крови осуществляется просто, эффективно и экономично.

Все гемоконцентраторы снабжены высокоэффективной полиарилсульфоновой мембраной, не требующей дополнительной промывки.

Превосходное соотношение первичного объема заполнения и производительности обеспечивают максимально бережное обращение с клетками крови.


MAQUET – The Gold Standard.

ООО «МАКЕ»
Россия, 109004, Москва,
ул. Станиславского,
д. 21, стр. 7
Тел.: (495) 514-0055
Факс: (495) 514-0056
Сервисный центр
Тел.: 8-800-333-62-53
info@maquet.ru
www.maquet.ru


MEMBER OF THE GETINGE GROUP

ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ БЕРЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С КРОВЬЮ


КОЭФФИЦИЕНТ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ
BC 20 PLUS

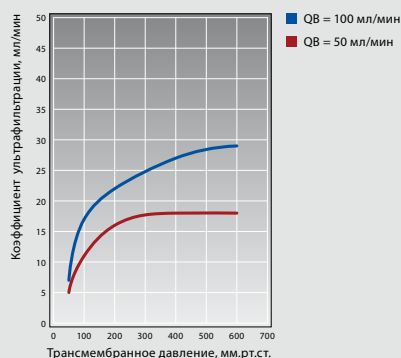

КОЭФФИЦИЕНТ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ
BC 60 PLUS

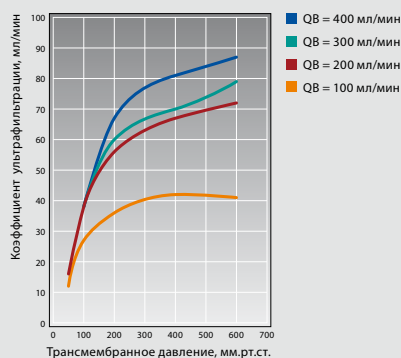

КОЭФФИЦИЕНТ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ
BC 140 PLUS

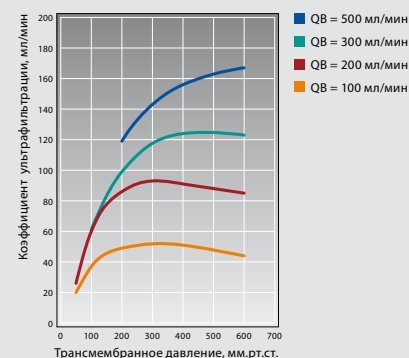

Отличительные черты гемоконцентраторов MAQUET:

- Мембрана для моментального применения: не требует промывки
- Низкий первичный объем заполнения
- Высокий коэффициент ультраfiltrации
- Высокая биосовместимость
- Высокая производительность

Гемоконцентраторы представлены в 3 размерах для оптимального решения клинических задач. Вы можете выбрать каждый гемоконцентратор в любой из трех модификаций: сама колонка гемоконцентратора в стерильной упаковке, комплект гемоконцентратора в наборе с линиями трубок и аксессуарами или компонент создаваемой заказчиком установки для перфузии.

Технические характеристики	BC 20 plus	BC 60 plus	BC 140 plus
Поверхность мембраны	0.22 кв.м	0.65 кв.м	1.35 кв.м
Первичный объем	17 мл	51 мл	102 мл
Максимальное трансмембранное давление	600 мм.рт.ст.	600 мм.рт.ст.	600 мм.рт.ст.
О-кольцо	силикон	–	–
Поддерживающее кольцо	полипропилен	–	–
Материал мембраны	полиарилсульфон	полиарилсульфон	полиарилсульфон
Толщина стенок капилляров	50 мкм	50 мкм	50 мкм
Внутренний диаметр капилляров	215 мкм	215 мкм	215 мкм

В результате технических усовершенствований спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.



Холдер, кат.№ НКН 4200



Беспромывочная технология и высокий коэффициент ультраfiltrации

Технологии MAQUET позволяют достичь высокой производительности ультраfiltrации и дают возможность использовать гемоконцентратор в любое время операции без предварительной промывки.

Информация для заказа:

Изделие	Каталожный номер	Количество в упаковке
BC 20 plus Колонка гемоконцентратора	BC 20 plus	10 штук
BC 60 plus Колонка гемоконцентратора	BC 60 plus	20 штук
BC 140 plus Колонка гемоконцентратора	BC 140 plus	20 штук
Комплект гемоконцентратора, вкл. (BC 20 plus, BC 60 plus или BC 140 plus) и: • Подсоединенные линии, длина 1000 мм, с зажимом Луер • Предохранительная крышка для фильтра • Линия фильтрации, длина 1000 мм • Мешок для фильтрата, объем 2000 мл		
Комплект с колонкой гемоконцентратора BC 20 plus	P-0420	10 штук
Комплект с колонкой гемоконцентратора BC 60 plus	P-0410	10 штук
Комплект с колонкой гемоконцентратора BC 140 plus	P-0400	10 штук