

ТРИ ВИДА ХИРУРГИИ – ОДНО РЕШЕНИЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ
YUNO OTN

MAQUET
GETINGE GROUP



ОДИН ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ ВМЕСТО ТРЕХ

YUNO OTN – специализированный операционный стол для ортопедии, травматологии и нейрохирургии. Современные технологии (использование фиброкарбонового волокна) позволяют получить максимальную рентгенпрозрачность в ходе хирургического вмешательства.

Эргономичность, модульность, устойчивость и функциональность – вот основные преимущества данного операционного стола, а удобное и вариативное позиционирование пациента делает его уникальным по сравнению с другими операционными столами.



ОРТОПЕДИЯ

Устройство для вытяжения нижних конечностей, выполненное из фиброкарбонового волокна и уникальная система позиционирования и фиксации положения ног пациента.



ТРАВМАТОЛОГИЯ

Оптимальная область для проведения рентгенисследования при артроскопии плеча.

Устройство для позиционирования руки TRIMANO.



НЕЙРОХИРУРГИЯ

Полностью фиброкарбоновая секция для спинальной хирургии.

МОДУЛЬНОСТЬ И ЭРГОНОМИЧНОСТЬ ОПЕРАЦИОННОГО СТОЛА YUNO OTN



Секция для операций на плече,
состоящая из трех частей





Полностью фиброкарбоновая
спинная секция



Компактный стенд для хранения всех необходимых
принадлежностей и аксессуаров



Специализированная приставка для спинальной хирургии

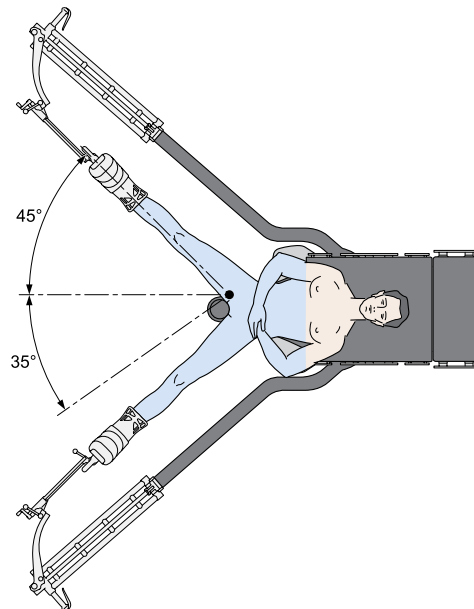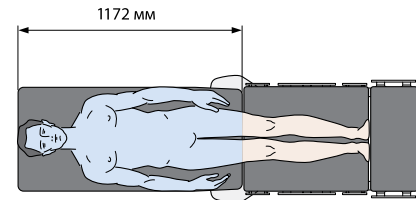

полностью рентгенпрозрачная область

Технические характеристики	
Максимальная нагрузка на операционный стол	454 кг
Вес операционного стола	350 кг
Регулировки положения стола с помощью электропривода:	
Регулировка положения стола по высоте	680-1280 мм
Положение Тренделенбурга/ обратный Тренделенбурга	+43° / -43°
Боковой наклон	+23° / -23°
Регулировка положения спинной секции	+90° / -90°
Регулировка положения ножных секций	+90° / -90°

MAQUET

GETINGE GROUP

ООО «МАКЕ»
Россия, 109004, Москва,
ул. Станиславского,
д. 21, стр. 3
Тел.: (495) 514-0055
Факс: (495) 514-0056
Сервисный центр
Тел.: 8-800-333-6253
info@maquet.com
www.maquet.ru

GETINGE GROUP is a leading global provider of products and systems that contribute to quality enhancement and cost efficiency within healthcare and life sciences. We operate under the three brands of ArjoHuntleigh, GETINGE and MAQUET. Arjo-Huntleigh focuses on patient mobility and wound management solutions. GETINGE provides solutions for infection control within healthcare and contamination prevention within life sciences. MAQUET specializes in solutions, therapies and products for surgical interventions, interventional cardiology and intensive care.